




Università di Napoli Federico II
Unità di Chirurgia Orale e Implantologia
Responsabile: Prof. Gilberto Sammartino

Implantologia post-estrattiva
immediata a carico immediato:



full arch inferiore




ESAME RADIOGRAFICO OPT PREOPERATORIO

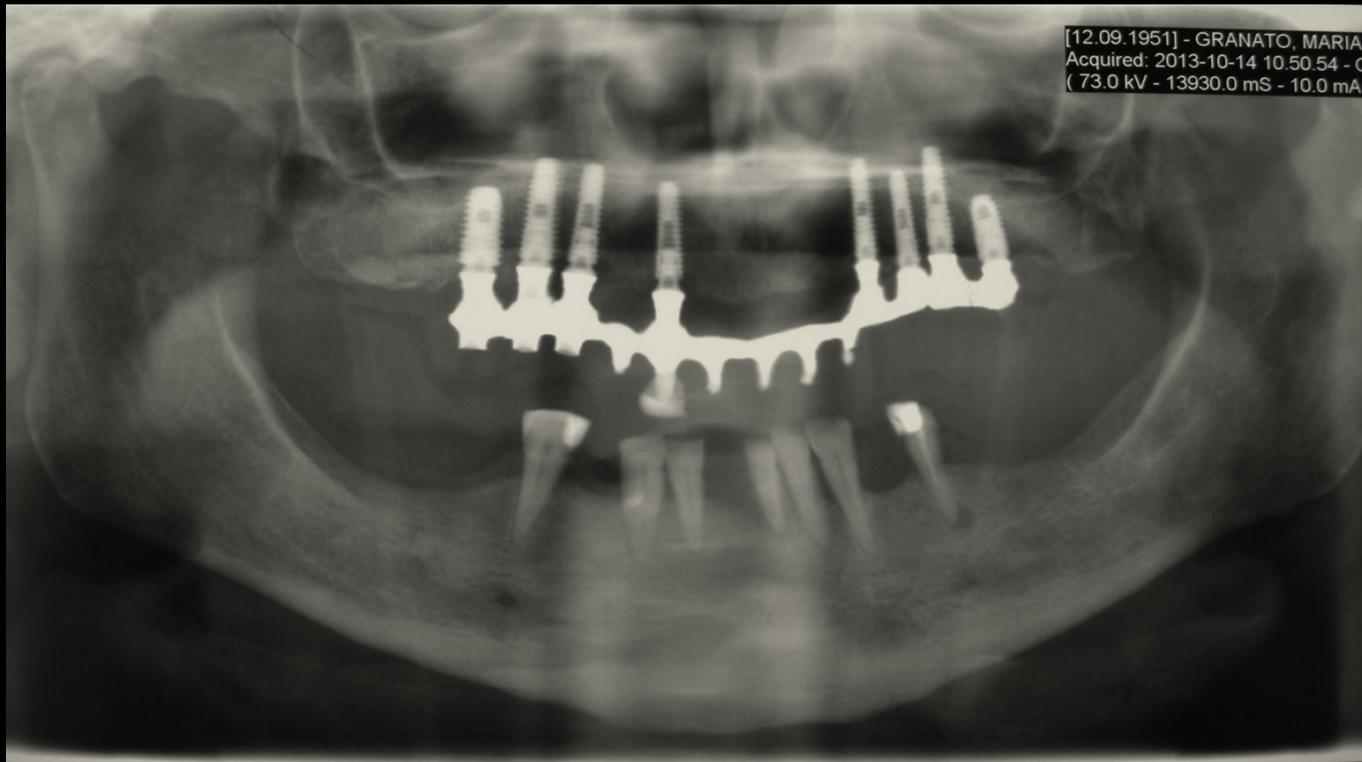

TC Dentascan preoperatoria

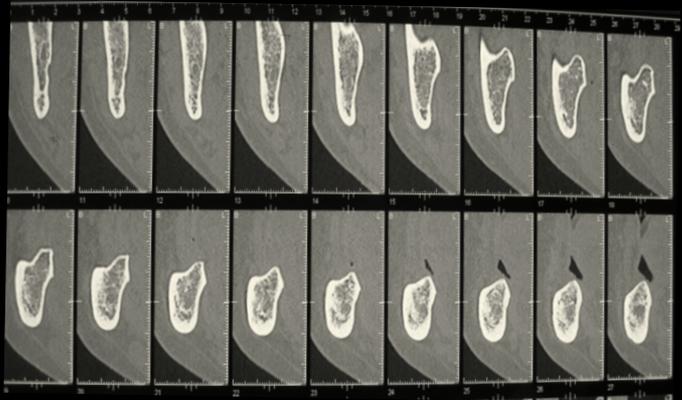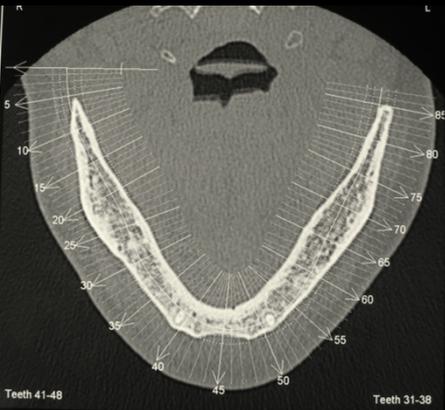

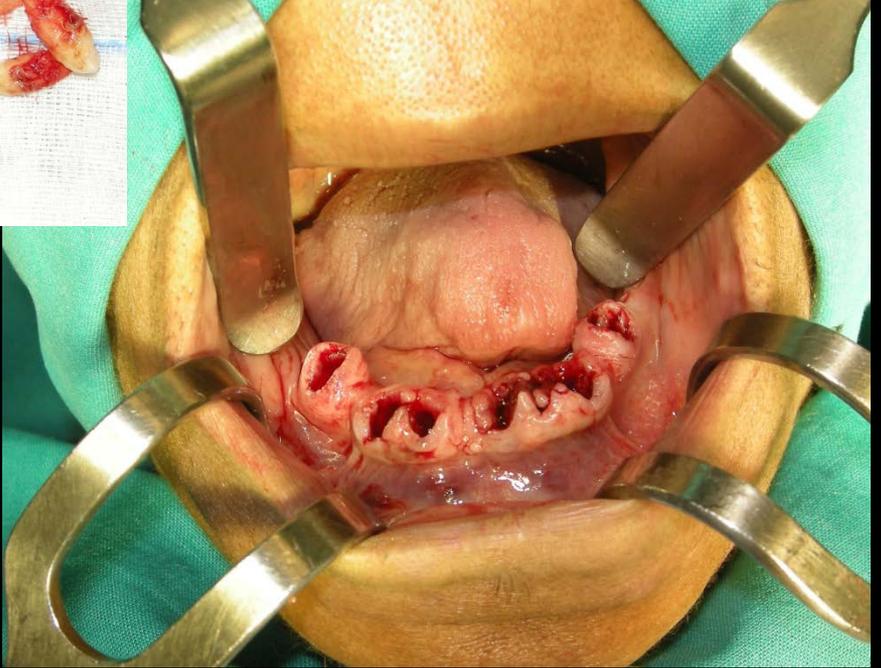


Preparazione dei siti implantari

Sequenza operativa per impianti di
4 mm di diametro








1. Fresa start 2 mm
2. Fresa pilot 2,8 mm
3. Fresa pilot 3,3 mm
4. Fresa cilindrica 3,3 mm
5. Fresa pilot 3,6 mm
6. Fresa cilindrica 3,6 mm
7. Fresa countersink 4 mm





Impianto Myth Two

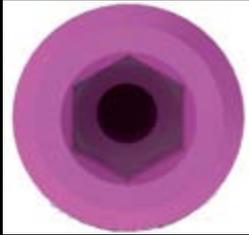


- Geometria conica
- Connessione interna esagonale profonda 2 mm

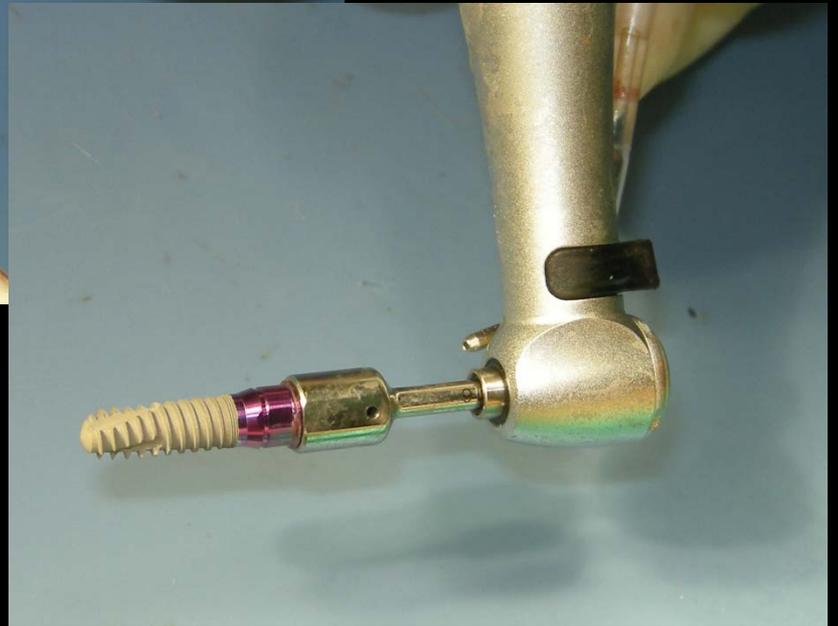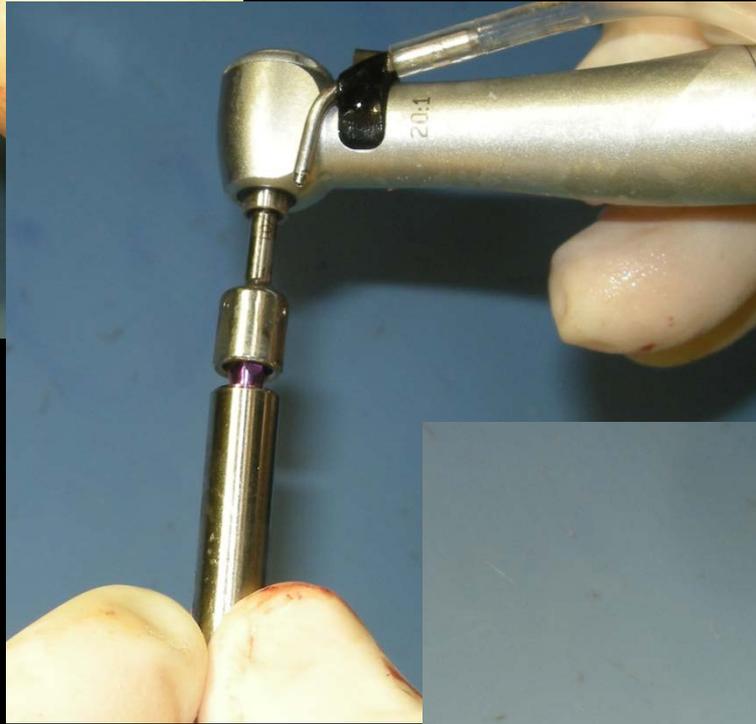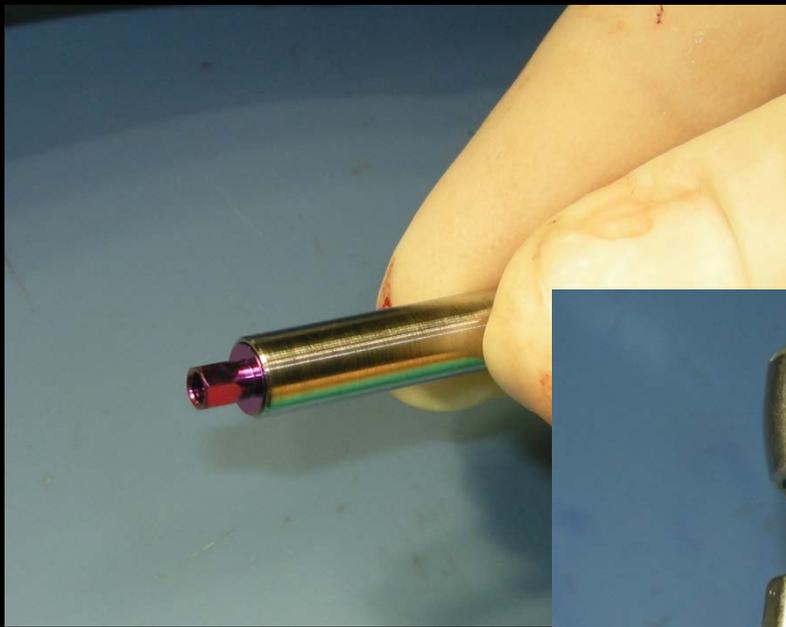

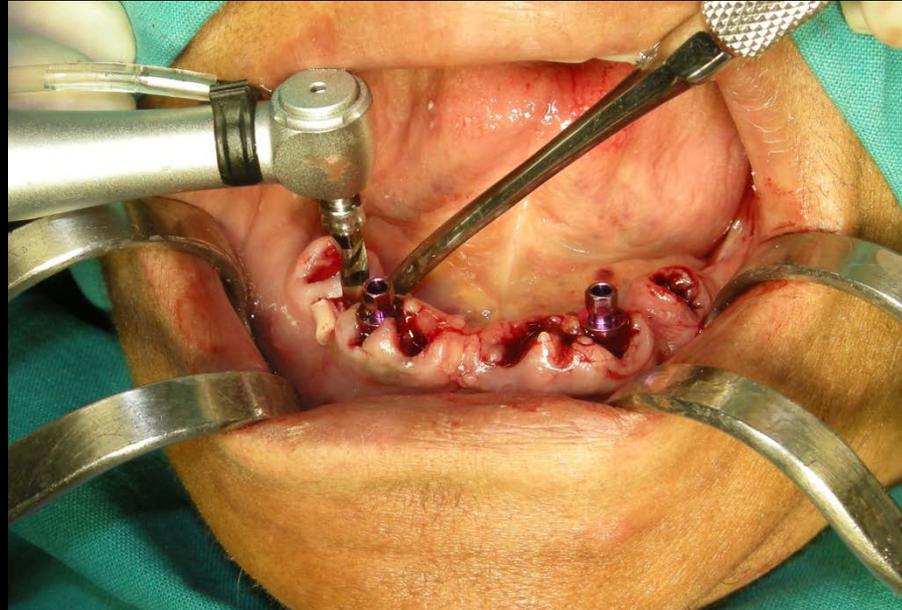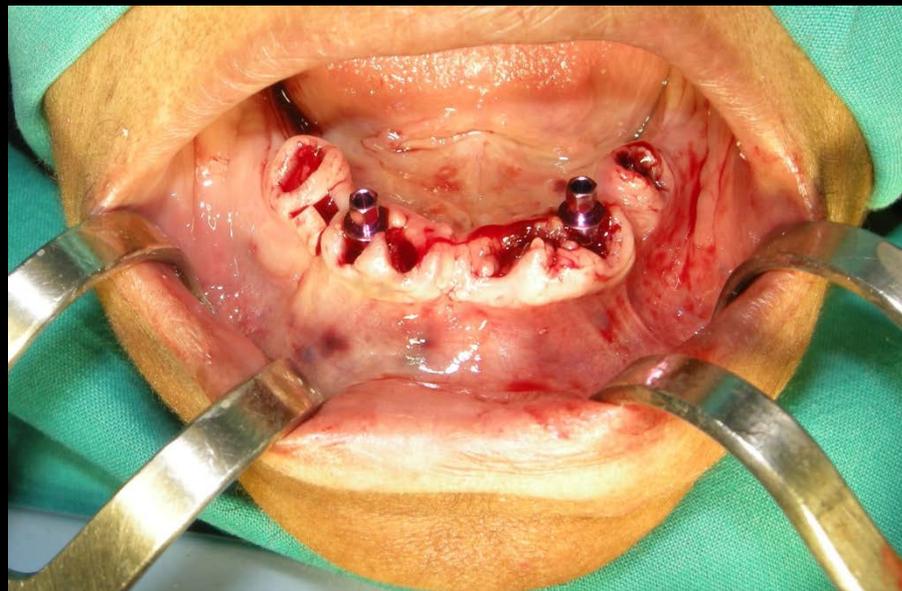


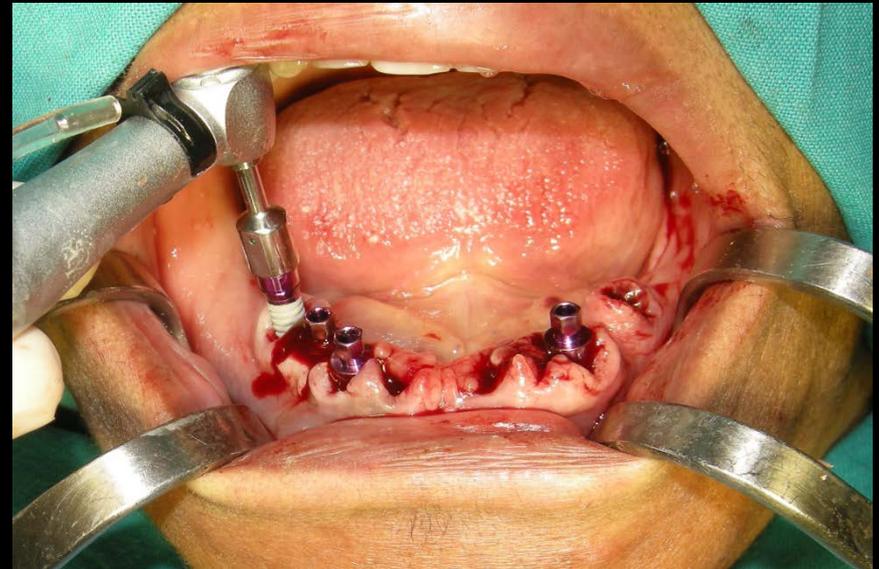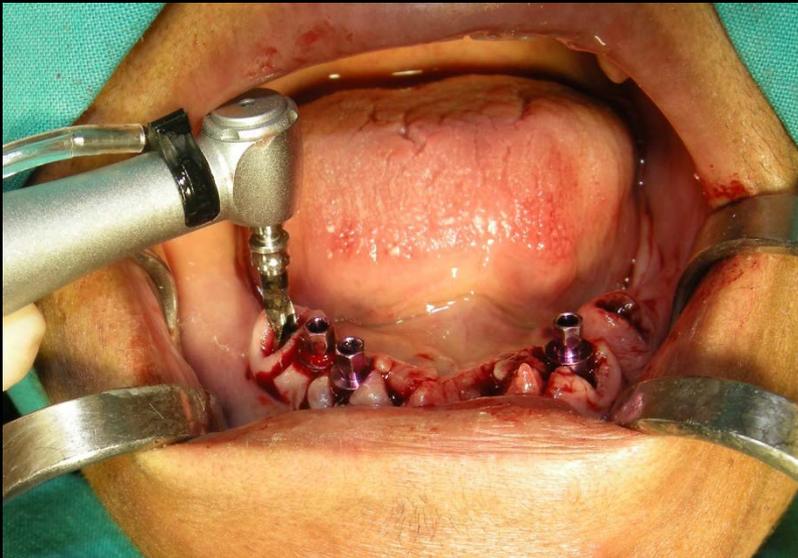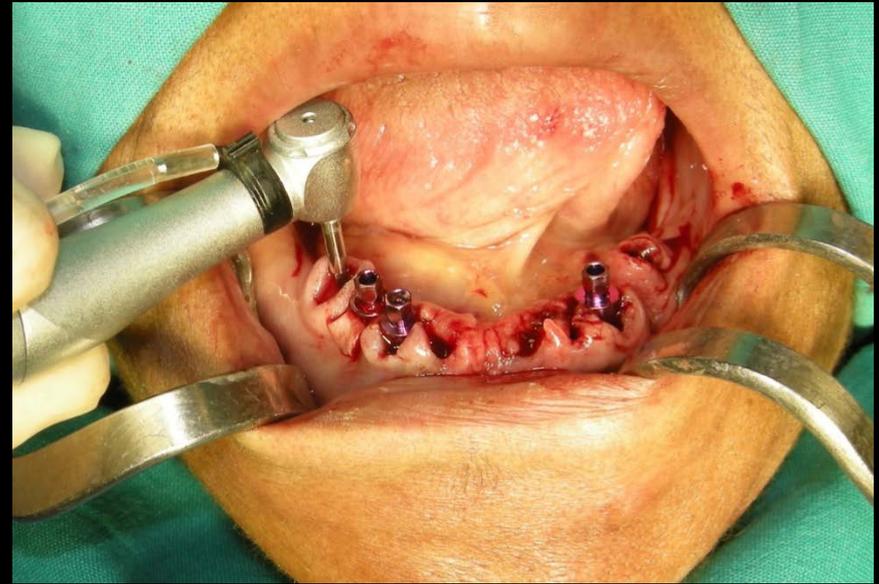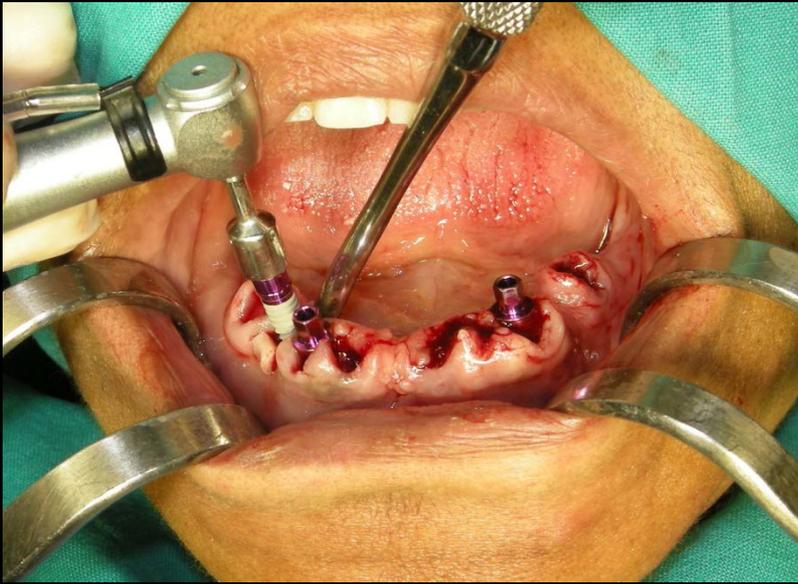


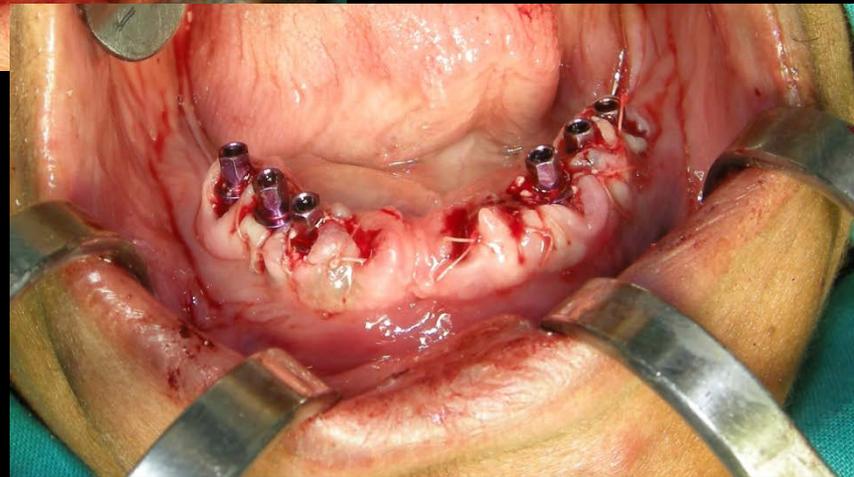




24 h dopo
Inserimento dei connettori

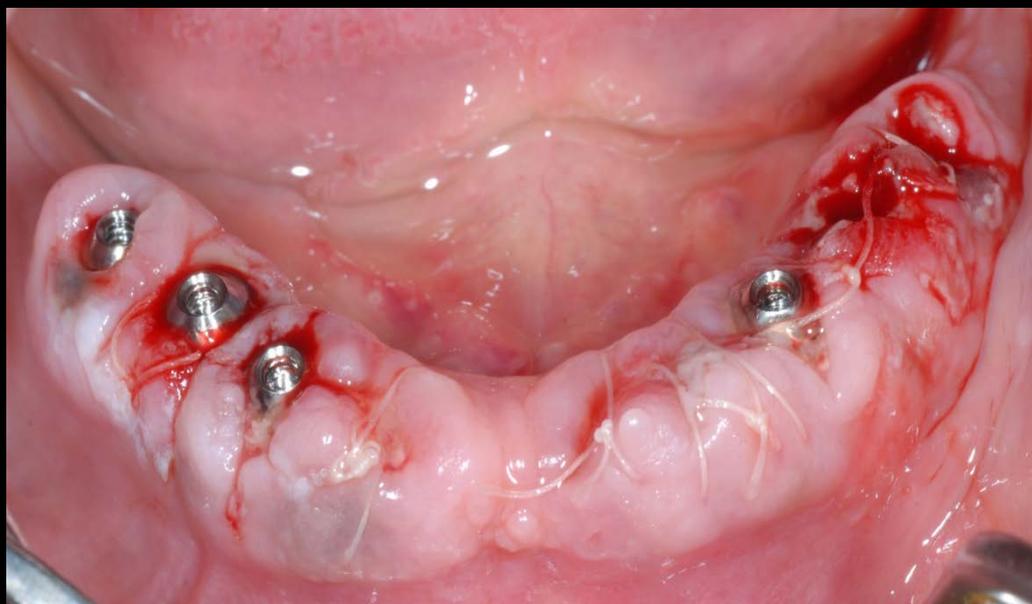

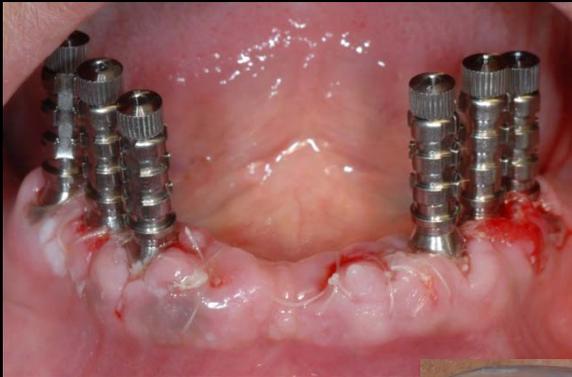


Preso dell'impronta con transfert
da impronta per connettori

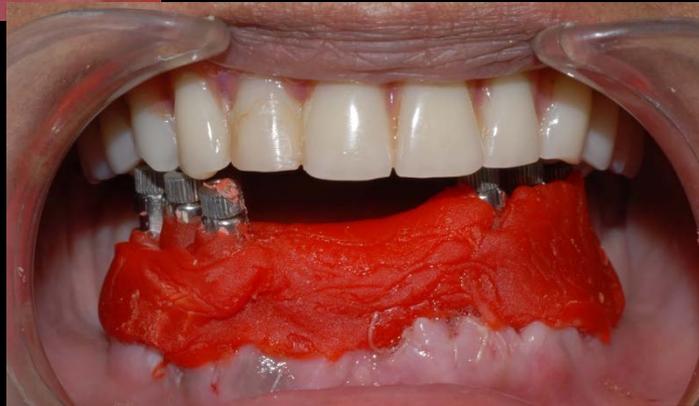





Protesi provvisoria
avvitata a carico
immediato rinforzata
con struttura metallica

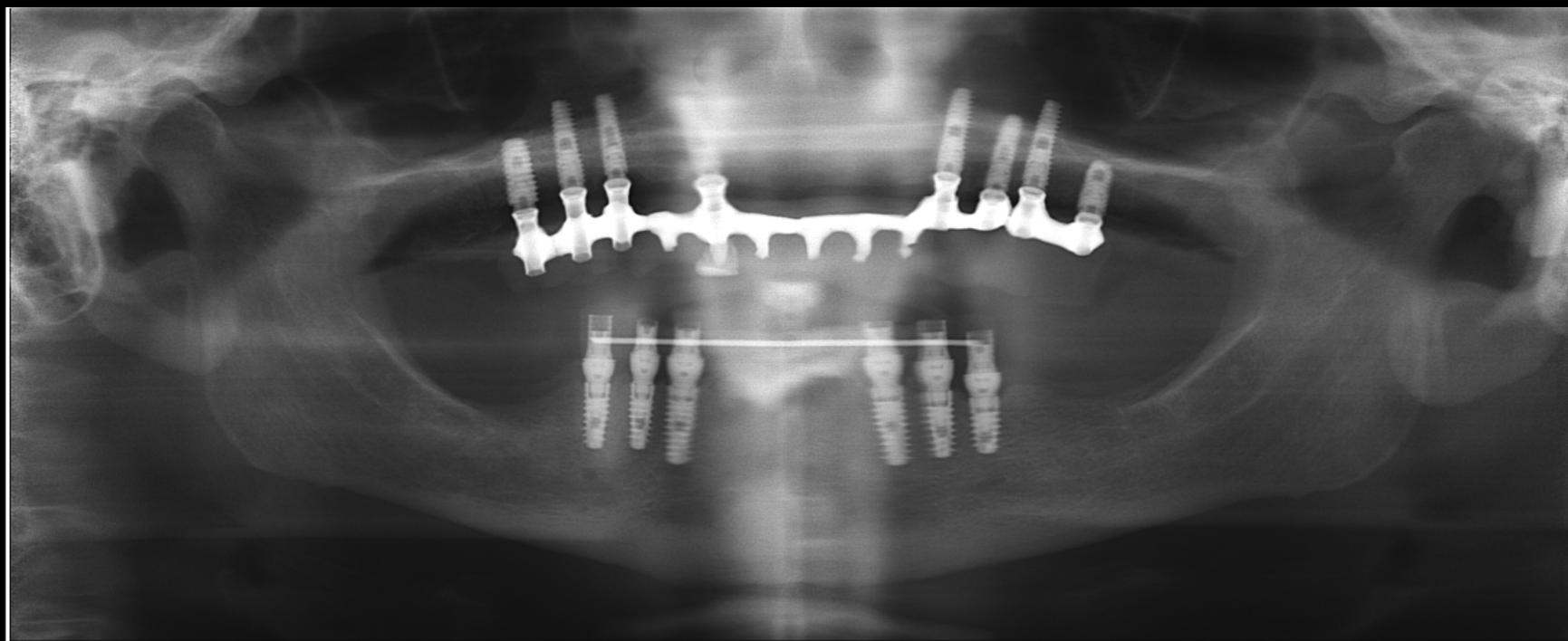

OPT di controllo a 4 mesi

Controllo clinico a 4 mesi dopo rimozione della protesi provvisoria





Struttura metallica
realizzata con metodica
CAD-CAM



Prova della struttura
metallica



Protesi definitiva



OPT definitiva

